


# LEGHOLDER<sup>®</sup> RX

## PRODUKTEÜBERSICHT 2021

BEINHALTER (FUSSSTÜTZE) FÜR DIE KNIECHIRURGIE

SWISS MADE  SINCE 2000

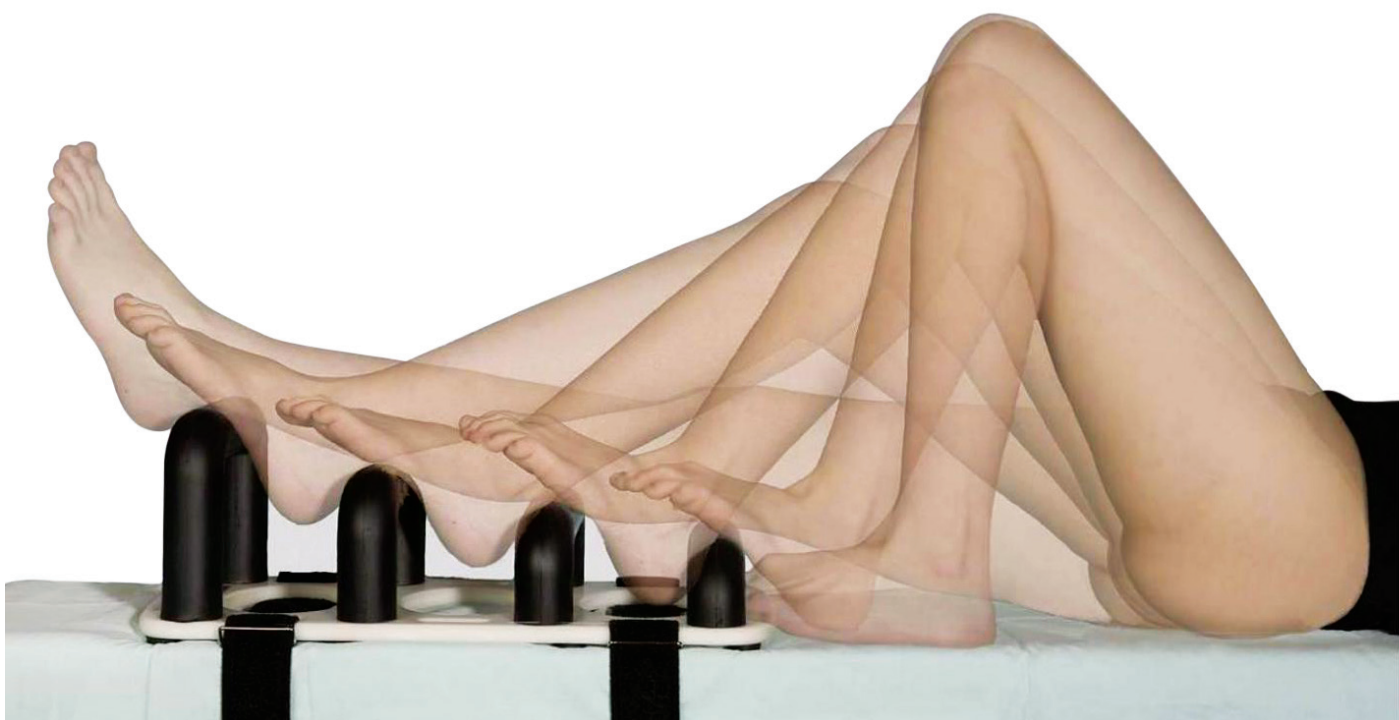

**FEH Medizintechnik**

MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE

Vertrieb Deutschland: FEH Medizintechnik GmbH • Am Stadtwalde 15, 48432 Rheine  
Tel.: +49 (0) 5971-98 56 63 • Fax: +49 (0) 59 71 - 8 70 00 • [www.FEH-Med.com](http://www.FEH-Med.com)

Hersteller: Wirz Ortho Mechanics • Schweiz

# VORTEILE

- ✓ Erübrigt in Kombination mit einer lateralen Seitenstütze einen Assistenten
- ✓ 6 verschiedene stabile Positionen
- ✓ Der Legholder ist einfach am OP-Tisch mit Hilfe der Velcrogurte zu befestigen.
- ✓ Keine Sterilisation erforderlich, kein Bedarf an zusätzlichen Verbrauchsmaterialien
- ✓ Röntgendurchlässig




“

*Dies ist die beste Erfindung in der Orthopädie der letzten 20 Jahre.*


”

Dr.med. Alois Lustenberger, Orthopädischer Chirurg,  
Gemeinschaftspraxis Orthomed, Schweiz

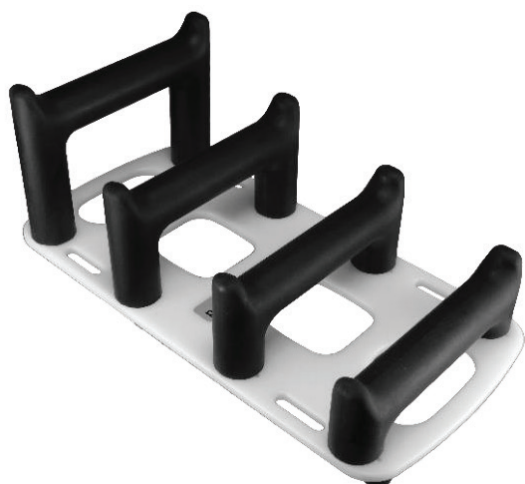


## Legholder RX® standard

Der in der Vergangenheit meistverkaufte Beinhalter LegholderRX® standard, zeichnet sich in der neuen überarbeiteten Ausführung durch eine stabilere Konstruktion, optimierte Polsterung mit seitlichen Noppen und mit Velcrogurten mit integrierter Zeichnung in den Zuglaschen aus.

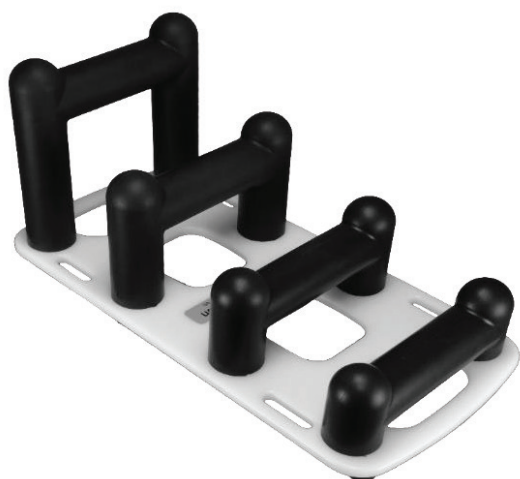


## Legholder RX® fusion

Der neue LegholderRX® fusion hat halbkugelige Noppen seitlich an den Bügeln. Dies ermöglicht einerseits, dass das OP-Tuch gut zwischen die Bügel hineingleiten und andererseits der Fuss nicht seitlich vom Bügel wegrutschen kann. Die Differenz der Bauhöhen zwischen den Bügeln ist leicht vergrößert, was eine bessere Stabilität gewährt.

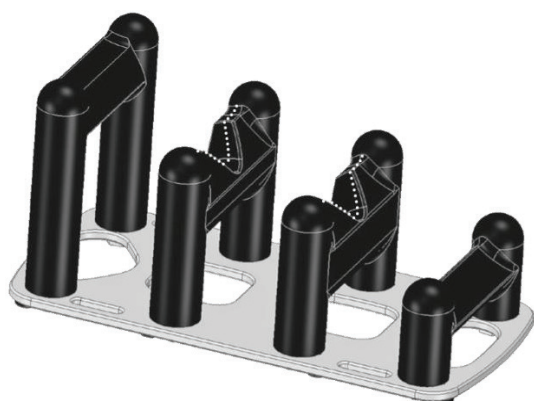

Die vergrößerte Bauhöhe kann durch Absenken des Beinteiles kompensiert werden.

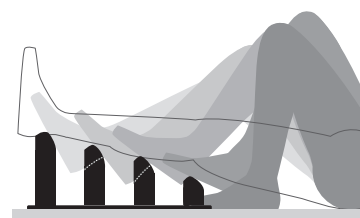

## Legholder RX® extra stable

Sehr stabile Positionierung durch biometrisch berechnete und ergonomische Auflageflächen, vergrößerte Bauhöhe und Vertiefung für die Achillessehne im 2. und 3. Bügel.

\*Jedes Produkt wird mit langen oder kurzen Velcrogurten geliefert.

# OPERATIONEN, DIE MIT LEGHOLDER RX® DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN



Der Legholder RX® erlaubt die intraoperative stabile Lagerung des Kniegelenks in **6 verschiedenen Beugstellungen**. Mit den Velcorgurten kann der Legholder RX® einfach direkt am Operationstisch unter der sterilen Abdeckung befestigt werden.

Diese Lagerungshilfe mit einer Seitenstütze am Oberschenkel ist sehr hilfreich in der Endoprothetik und bei anderen offenen Knieoperationen, wie Knorpelrekonstruktionen und in der Patellachirurgie.

**Bewegungen im OSG sind frei, die Malleolen und die Mitte des Sprunggelenks zur Achsenbestimmung sind gut auffindbar.**

“

*Die Modelle sind unverwüstlich und langlebig... Mir persönlich gefällt die extra stabile Version sehr gut. Sie bietet zusätzliche Stabilität, vor allem für grössere und schwerere Patienten.*

”

Prof. Dr. med. Niklaus Friederich, Universitätsspital Basel

# NEUE VERBESSERTE VELCROGURTE



Mit Hilfe der Velcrogurte lässt sich der Beinhalter einfach am OP-Tisch befestigen. Die praktische Zuglasche mit dem Piktogramm erleichtert die Handhabung.



# VERFÜGBAR IN ZWEI LÄNGEN

## KURZE VELCROGURTE

Der kurze Velcrogurt wird idealerweise verwendet, wenn man den Legholder RX® an der Beinauflage der Operationsseite befestigen kann. Dies ermöglicht die unabhängige Bewegung der Beinauflage der Operationsseite.



# LANGE VELCROGURTE

Der lange Velcrogurt kann sowohl für die Befestigung an der halben Beinauflage der Operationsseite als auch an der ganzen Beinauflage angewendet werden.



## TECHNISCHE DATEN


**Dimensionen:** 490 x 240 x 200 mm

**Gewicht:** 3 kg, einschliesslich 2 robuste Velcrogurte (lange oder kurze Version)

**Spezifikationen:** Pflegeleichte, robuste, nicht allergene Kunststoffteile, röntgendurchlässig.

**Reinigung** Muss nicht sterilisiert werden, inert gegen übliche Reinigungsmittel.

# LEGHOLDER RX<sup>®</sup>

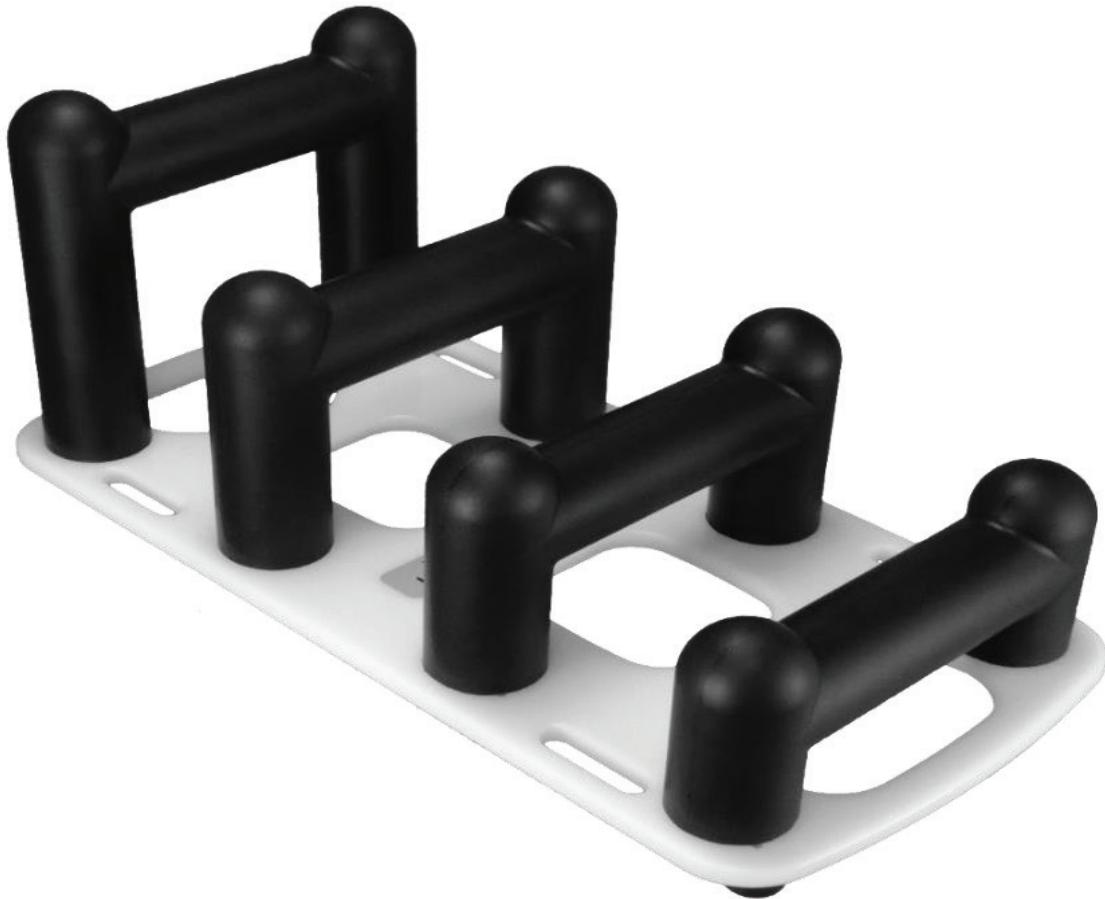

SWISS MADE  SINCE 2000



**FEH Medizintechnik**  
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE

Vertrieb Deutschland: FEH Medizintechnik GmbH • Am Stadtwalde 15, 48432 Rheine  
Tel.: +49 (0) 5971-98 56 63 • Fax: +49 (0) 59 71 - 8 70 00 • [www.FEH-Med.com](http://www.FEH-Med.com)



**Hersteller:** Wirz Ortho Mechanics • Schweiz

**Produkt:** LegholderRX<sup>®</sup> mod. dép.

CE (Swissmedic CH-201505-0035)

FDA registriert

Konform zum Medizinproduktegesetz (MDA) ISO 13485

GLN: 7649994277000